



YAŞAMINIZI DEĞERLİ KILAN ÜRÜNLER

Phone: +90 532 614 60 69

Email: info@dnamaske.com


www.dnamaske.com

6 KATLI
6 LAYERS
6 COUCHE

• Termoplastik elastomer
• Thermoplastic elastomer
• Élastomère thermoplastique

• Polipropilen
• Polypropylene
• Polypropylène

• Polipropilen
• Polypropylene
• Polypropylène

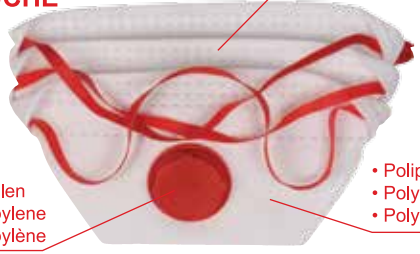

1

UYGULAMA / APPLICATION / ANWENDUNG



2



3



4



5



6

UYGULAMA

- 1) Maskeyi ambalajından çıkartın ve lastikleri yukarı gelecek şekilde tutun.
- 2) Üst ve alt paneli tamamen açın, üst panelin ortasında bulunan burunluđu baş parmağınızın etrafında hafifçe bükün.
- 3) Maskeyi, üst panel burnunuza ve alt panel güvenli bir şekilde çenenizin altına gelecek şekilde yüzünüze yerleştirin.
- 4) Üst lastiđi çekerek başınızın üzerinden geçirin. Daha sonra alt lastiđi başınızın üzerinden çekerek geçirin ve boynunuzun etrafına, kulaklarınızın altına yerleştirin.
- 5) Yüzünüze tam oturması için üst paneli burun köprünüzü, alt paneli çenenizin altına gelecek şekilde ayarlayın. Engel olacağı için, saç, sakal, takı ve giysilerinizin yüzünüze maske arasında olmamasına dikkat edin.
- 6) İki elinizin parmak uçlarını metal burunluđun üstüne yerleştirin. İki elinizi kullanarak, parmak uçlarınızla metal burunluđu içe doğru itererek burununuz şeklini almasını sağlayın.

ÇIKARTILMASI

Tek yada iki elle yapılabilir.

- A) Maskenin yüzünüzde olan kısmına dokunmadan, alt lastiđi boynunuzun etrafından ve başınızın üzerinden geçirecek yavaşça çıkartın. Ardından üst lastiđi çıkartın. Maskeye temas etmeyin.
- B) Kurumunuzun enfeksiyon kontrol politikasına göre depolayın veya atın.

UYARI

Maskeler, havada bulunan belirli bulaşıcı/kirli maddelere karşı korunmaya yardımcı olurlar. Kullanmadan önce, paketlenen bir parçası olarak sunulan Kullanıcı Talimatı mutlaka okunmalıdır. Yanlış kullanım, hastalık veya ölüme sebep olabilir. Doğru kullanım için amirimize ya da Kullanım Kılavuzu'na başvurun veya DNA Maske Kişisel Güvenlik Birimi'ni arayın.

APPLICATION

- 1) Remove the respirator from its packaging and hold with straps facing upward.
- 2) Fully open the top and bottom panels, bending slightly the nosepiece around your thumb at the center of the top panel.
- 3) Place the respirator on your face so that the top panel rests on your nose and the bottom panel is securely under your chin.
- 4) Pull the top strap over your head and resting high at the top back of your head. Then, pull the bottom strap over your head and position it around your neck below ears.
- 5) Adjust for a comfortable fit by pulling the top panel toward the bridge of your nose and the bottom panel under your chin. Make certain hair, facial hair, jewelry and clothing are not between your face and the respirator as they will interfere with it.
- 6) Place your fingertips from both hands at the top of the metal nosepiece. Using two hands, mold the metal nosepiece to the shape of your nose by pushing inward.

REMOVAL

- Can be performed using one or both hands.
- A) Without touching the respirator facepiece, slowly lift the bottom strap from around your neck up over your head. Then lift off the top strap. Do not touch the respirator.
 - B) Store or discard according to your facility's infection control policy.

WARNING

Respirators help protect against certain airborne contaminants. Before use the wearer must read and understand the User Instructions provided as a part of the product packaging. Misuse may result in sickness or death. For correct use, consult supervisor and User Instructions, or call DNA Maske Personal Safety Department.

APPLICATION

- 1) Retirez le respirateur de son emballage et tenez-le avec les sangles orientées vers le haut.
- 2) Ouvrez complètement les panneaux supérieur et inférieur en pliant légèrement la pièce antibruit autour de votre pouce au centre du panneau supérieur.
- 3) Placez le respirateur sur votre visage de sorte que le panneau supérieur repose sur votre nez et que le panneau inférieur soit solidement sous votre menton.
- 4) Tirez la sangle supérieure au-dessus de votre tête et reposez-vous en haut à l'arrière de votre tête. Ensuite, tirez la sangle inférieure sur votre tête et placez-la autour de votre cou sous les oreilles.
- 5) Ajustez pour un ajustement confortable en tirant le panneau supérieur vers l'arête de votre nez et le panneau inférieur sous votre menton. Assurez-vous que les cheveux, les poils du visage, les bijoux et les vêtements ne se trouvent pas entre votre visage et le respirateur, car ils interféreront avec celui-ci.
- 6) Placez le bout des doigts des deux mains en haut de l'embout métallique. À l'aide de deux mains, façonnez l'embout nasal en métal à la forme de votre nez en poussant vers l'intérieur.

SUPPRESSION

- Peut être exécuté à l'aide d'une ou des deux mains.
- A) Sans toucher le masque du respirateur, soulevez lentement la sangle inférieure de votre cou au-dessus de votre tête. Retirez ensuite la sangle supérieure. Ne touchez pas le respirateur.
 - B) Conserver ou jeter conformément à la politique de contrôle des infections de votre établissement.

AVERTISSEMENT

Les respirateurs aident à protéger contre certains contaminants en suspension dans l'air. Avant utilisation, l'utilisateur doit lire et se reposer les instructions d'utilisation fournies dans le cadre de l'emballage du produit. Une mauvaise utilisation peut entraîner des maladies ou la mort. Pour une utilisation correcte, consultez le superviseur et les instructions d'utilisation, ou appelez le service de sécurité personnelle de DNA Maske.

ÇIKARMA / REMOVAL / SUPPRESSION



CE
2163



YAŞAMINIZI DEĞERLİ KILAN ÜRÜNLER


Phone: +90 532 614 60 69
Email: info@dnamaske.com
www.dnamaske.com

6 SCHICHTEN
6 CAPAS
6 طبقات

• Thermoplastisches elastomer
• Elastomero termoplástico
• الاستومر بالحرارة

• Polypropylen
• Polipropileno
• البولي بروبيلين

• Polipropilen
• Polypropylene
• Polypropylène

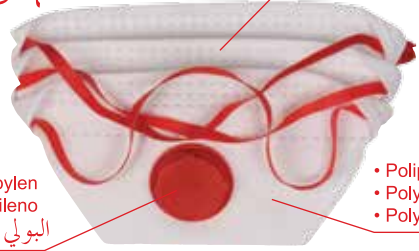

ANWENDUNG / SOLICITUD / الإزالة



1



2



3



4



5



6

ANWENDUNG

- 1) Nehmen Sie das Atemschutzgerät aus der Verpackung und halten Sie es mit den Gurten nach oben.
- 2) Öffnen Sie die obere und untere Platte vollständig und biegen Sie das Geräuschstück in der Mitte der oberen Platte leicht um Ihren Daumen.
- 3) Platzieren Sie die Atemschutzmaske so auf Ihrem Gesicht, dass die obere Abdeckung auf Ihrer Nase aufliegt und die untere Abdeckung sicher unter Ihrem Kinn liegt.
- 4) Ziehen Sie den oberen Gurt über Ihren Kopf und ruhen Sie hoch oben am Hinterkopf. Ziehen Sie dann den unteren Riemen über Ihren Kopf und legen Sie ihn unter den Ohren um Ihren Hals.
- 5) Stellen Sie eine bequeme Passform ein, indem Sie die obere Platte zum Nasenrücken und die untere Platte unter Ihrem Kinn ziehen. Stellen Sie sicher, dass sich Haare, Gesichtshaare, Schmuck und Kleidung nicht zwischen Ihrem Gesicht und der Atemschutzmaske befinden, da sie diese beeinträchtigen.
- 6) Legen Sie Ihre Fingerspitzen mit beiden Händen oben auf das Metall-Objektivrevolver. Formen Sie das Metall-Objektivrevolver mit zwei Händen an die Form Ihrer Nase, indem Sie es nach innen drücken.

ENTFERNUNG

Kann mit einer oder beiden Händen ausgeführt werden.

A) Heben Sie den unteren Gurt langsam von Ihrem Hals über Ihren Kopf an, ohne das Atemschutzmasken zu berühren. Heben Sie dann den oberen Gurt ab. Berühren Sie nicht die Atemschutzmaske.

B) Lagern oder entsorgen Sie es gemäß den Richtlinien Ihrer Einrichtung zur Infektionskontrolle.

WARNUNG

Atemschutzgeräte schützen vor bestimmten Luftschadstoffen. Vor dem Gebrauch muss der Träger die Benutzeranweisungen lesen und verstehen, die als Teil der Produktverpackung enthalten sind. Missbrauch kann zu Krankheit oder Tod führen. Wenden Sie sich zur korrekten Verwendung an den Supervisor und die Benutzeranweisungen oder rufen Sie die Personal-Sicherheitsabteilung von DNA Maske an.

SOLICITUD

- 1) Saque el respirador de su empaque y sosténgalo con las correas hacia arriba.
- 2) Abra completamente los paneles superior e inferior, doblando ligeramente la pieza acústica alrededor de su pulgar en el centro del panel superior.
- 3) Coloque el respirador en su cara de modo que el panel superior descance sobre su nariz y el panel inferior quede seguro debajo de su barbilla.
- 4) Pase la correa superior por encima de la cabeza y colóquela en lo alto de la parte superior posterior de la cabeza. Luego, pase la correa inferior sobre su cabeza y colóquela alrededor de su cuello debajo de las orejas.
- 5) Ajuste para un ajuste cómodo tirando del panel superior hacia el puente de su nariz y el panel inferior debajo de su barbilla. Asegúrese de que el cabello, el vello facial, las joyas y la ropa no estén entre su cara y el respirador, ya que interferirán con él.
- 6) Coloque las yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior del revólver metálico. Con las dos manos, moldee el revólver de metal a la forma de su nariz empujándolo hacia adentro.

ELIMINACIÓN

Se puede realizar con una o ambas manos.

A) Sin tocar la pieza facial del respirador, levante lentamente la correa inferior alrededor de su cuello por encima de su cabeza. Luego levante la correa superior. No toque el respirador.

B) Almacene o deseché de acuerdo con la política de control de infecciones de su centro.

ADVERTENCIA

Los respiradores ayudan a proteger contra ciertos contaminantes en el aire. Antes de usar, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones para el usuario proporcionadas como parte del empaque del producto. El mal uso puede provocar enfermedades o la muerte. Para un uso correcto, consulte al supervisor y las instrucciones del usuario, o llame al Departamento de seguridad personal de DNA Maske.

كيفية إرتداء القناع

- 1) أخرج القناع من العبوة ثم أمسكه بحيث تكون الأشرطة المطاطية متجهة نحو الخارج.
- 2) قم بفتح القناع بشكل كامل من الأعلى والأسفل، مع ثني قطعة الأنف حول إصبعك.
- 3) ضع القناع على وجهك بحيث تستقر قطعة العلوية على الأنف ولوحة القناع السفلية بإحكام تحت ذقنك.
- 4) اسحب الشريط العلوي فوق رأسك وضعه فوق الأذنين. ثم اسحب الشريط السفلي فوق رأسك وضعه حول رقبتك وتحت أذنيك.
- 5) قم بتعديل القناع ليتلاءم مع وجهك من خلال سحب اللوحة العلوية باتجاه جسر الأنف واللوحة السفلية أسفل الأذن. مع التأكد بعدم وجود أي شعير، شعير الوجه أو أي مجوهرات بين القناع والوجه.
- 6) ضع أطراف أصابعك (من كلتا اليدين) على الجزء العلوي من الأنف. ثم قم بتشكيل قطعة الأنف عن طريق دفعها للداخل من الجهتين ثم تحريك أطراف أصابعك لأسفل من كلا جانبي الأنف.


كيفية خلع القناع

- أ) دون لمس القناع، ارفع الشريط المطاطي السفلي ببطء من حول رقبتك لأعلى فوق رأسك. ثم ارفع الشريط العلوي.
- ب) قم بتخزين القناع أو التخلص منه وفقاً لسياسة مكافحة العدوى في منشأتك.

تحذير

تساعد أقمعة التنفس على الحماية من بعض الملوثات المحمولة في الهواء. يجب على مرتديها قبل الاستخدام قراءة دليل المستخدم وفهمه. فهذه الإرشادات هي جزء من عبوة المنتج. الاستخدام الخاطئ يؤدي إلى خطر الموت. لطريقة استخدام صحيحة، اقرأ تعليمات المستخدم، أو اتصل بقسم السلامة الشخصية الخاص بشركتنا DNA Maske

ENTFERNUNG / ELIMINACIÓN / الإرتداء

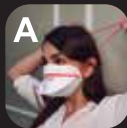

CE
2163